

## CPR Manikin Little Grey

### About the Simulator

The Little Grey CPR Manikin is the most realistic, economical manikin available for the training of CPR skills. Features include head tilt, sanitary airway system, realistic chest rise, adult compression resistance, palpable landmarks, and a lightweight and compact design.

### List of Components

- Base
- Simulated skin (nylon cover) with zipper
- Adult Compression Block

### Set Up Free


Your Little Grey Manikin is shipped disassembled. Simply follow below TWO easy steps to assemble your manikin.

1. Open the box, take out the manikin base(s) and wait until the foams recoil as normal.
2. Attaching the compression block to the middle of the base before zip the cover to make sure the proper compression resistance.


*(See figure 1 )*

### Maintenance

No need to attach the compression block to the Base again nor install the lung bag until there is a wear & tear on the manikin. Try to gently pull the compression block out and check the recoil action to avoid contaminating the manikin by errors. In case you need further assistance, please feel free to contact us by email: [info@panckoo.com](mailto:info@panckoo.com)

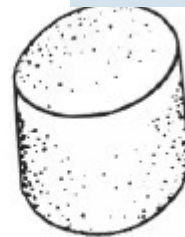

Adult Compression Block

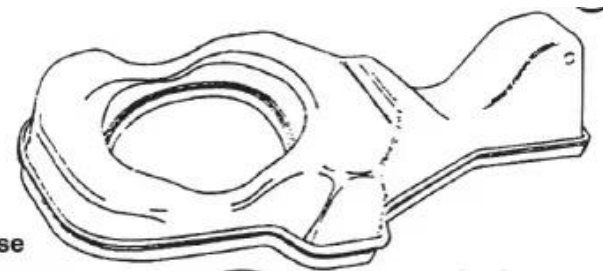

Base

Figure 1



## CPR Manikin Little Grey

### Acerca del simulador

El maniquí de CPR Little Grey es el más realista, económico

Maniquí disponible para el entrenamiento

de habilidades de CPR. Las características incluyen inclinación de la cabeza, sistema sanitario de vías respiratorias, elevación realista del pecho, compresión para adultos resistencia, puntos de referencia palpables y un diseño ligero y compacto.



### Lista de componentes


- Base
- Piel simulada (funda de nailon) con cremallera
- Bloque de compresión para adultos

### Configurar gratis

Su Maniquí se envía desmontado.

Simplemente siga los DOS sencillos pasos a continuación para ensamblar su maniquí. Figura 1

1. Abra la caja y saque la(s) base(s) del maniquí.  
y espere hasta que las espumas retrocedan con normalidad.
2. Fijación del bloque de compresión al medio de la base antes de cerrar la cubierta para asegurarse de que la resistencia a la compresión sea adecuada.

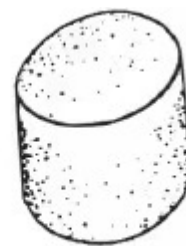

Adult Compression Block

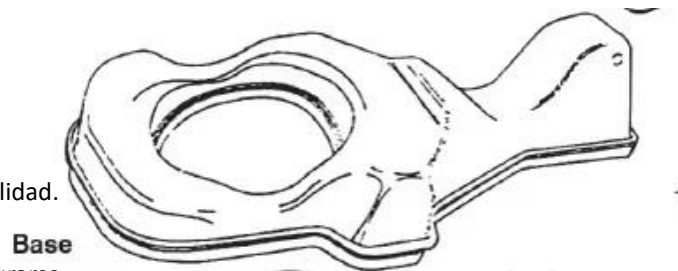


Figura 1

### Mantenimiento

No es necesario volver a colocar el bloque de compresión en la base ni instalar la bolsa pulmonar hasta que el maniquí se desgaste. Intente sacar suavemente el bloque de compresión y verifique el retroceso. Acciones para evitar la contaminación del maniquí por errores. En caso de que necesite más ayuda, no dude en contactarnos por correo electrónico: [info@panckoo.com](mailto:info@panckoo.com)



## CPR Manikin Little Grey

### 시뮬레이터 정보

리틀 그레이 CPR 마네킹은 가장 현실적이고 경제적인 훈련에 사용할 수 있는 마네킹 심폐소생술 기술. 특징은 다음과 같습니다. 머리 기울임, 위생적인 기도 시스템, 현실적인 가슴 상승, 성인 압박 저항, 눈에 띄는 랜드마크, 가볍고 컴팩트한 디자인.



### 구성 요소 목록

- 베이스
- 지퍼가 달린 시뮬레이션 피부(나일론 커버)
- 성인 압박 블록

### 무료로 설정

리틀 그레이 마네킹은 분해된 상태로 배송됩니다. 아래의 두 가지 쉬운 단계에 따라 간단히 조립하세요.


마네킹. 그림

1. 상자를 열고 마네킹 베이스를 꺼냅니다. 폼이 정상적으로 반동할 때까지 기다리세요.
2. 압축 블록을

적절한 압축 저항을 확인하기 위해 커버를 지퍼로 잠그기 전에 베이스 중앙을 확인하세요.

### 유지

마네킹이 마모될 때까지 압축 블록을 베이스에 다시 부착하거나 패백을 설치할 필요가 없습니다. 압축 블록을 부드럽게 당겨서 반동을 확인하십시오. 오류로 인해 마네킹이 오염되는 것을 방지하기 위한 조치입니다. 추가 도움이 필요한 경우 [info@panckoo.com](mailto:info@panckoo.com) 으로 이메일을 보내 주시기 바랍니다.

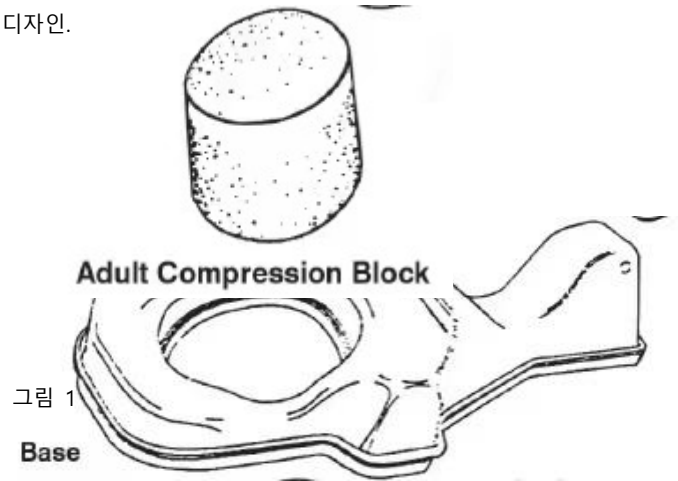

## CPR Manikin Little Grey

### シミュレーターについて

リトル・グレイのCPRマネキンは、最も現実的で経済的トレーニングに利用できるマネキン心肺蘇生スキルの向上。特徴としては以下が挙げられます 頭部傾斜、衛生気道システム、リアルな胸の立ち上がり、大人の着圧抵抗、明白なランドマーク、および軽量かつコンパクトなデザイン。




### コンポーネントのリスト

ベース  
模擬スキン（ナイロンカバー）ジッパー付き  
成人用圧迫ブロック

### 無料でセットアップ

リトル グレイ マネキンは分解された状態で発送されます。以下の 2 つの簡単な手順に従って組み立ててください。Base マネキン。

- 1.箱を開け、マネキンベースを取り出します。泡が通常どおり反動するまで待ちます。
2. 圧縮ブロックをカバーを閉める前にベースの中央を締めて、適切な圧縮抵抗を確認してください。

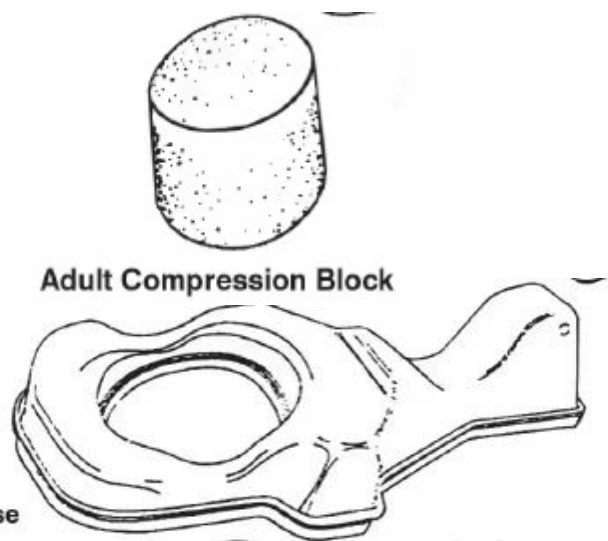

### メンテナンス

マネキンに磨耗が生じるまで、圧縮ブロックをベースに再度取り付けたり、肺バッグを取り付けたりする必要はありません。コンプレッションブロックをゆっくりと引き出して反動を確認してください。エラーによるマネキンの汚染を避けるためのアクション。さらにサポートが必要な場合は、お気軽に電子メールでお問い合わせください: [info@panckoo.com](mailto:info@panckoo.com)

